

JoinMAX es un dispositivo médico con un nuevo diseño para la articulación de la rodilla desarrollado por el Instituto de biotecnología Coreano.



Sistema bio térmico
para el tratamiento de
la articulación de la rodilla

JoinMAX[®]



JoinMAX es un producto de alta calidad
fabricado bajo las normas internacionales
ISO 9001, ISO 13485

FDA

JoinMAX es un dispositivo médico
registrado USA
FDA-registration N° : 3004887696



N° de autorización médica : 04-1246
Instrumento médico fabricado con licencia N° 651
Fabricado por : Changeui Médical Co, Ltd

Teléfono de atención a distribuidores
911107844
www.diskdr.es

JoinMAX
Bio Heating System

A diferencia de los dispositivos térmicos existentes para la rodilla que difunden el calor sólo en la piel, JoinMAX penetra profunda y rápidamente en la rodilla, relaja los músculos y alivia los síntomas asociados con el desgaste de su estructura.

Gracias a la variable longitud de onda de 700 a 50 000 nanómetros, JoinMax proporciona el calor adecuado, lo difunde profundamente y rápidamente alivia el dolor de la rodilla.

- A través de su sistema de radiación de calor de las lámparas halógenas y las lámparas de infrarrojos, JoinMAX reduce el dolor de rodilla y relaja los músculos más rápido.
- El diseño ergonómico de joinMax adecuado a la forma de la rodilla, permite a los cátodos térmicos difundir perfectamente el calor en toda la superficie de contacto. La energía térmica penetra profundamente en la rodilla.
- La superficie de los cátodos permite una alta conductividad térmica, y una acción anti-bacteriana.
- El panel de control con una unidad de memoria integrado en JoinMAX, permite regular la temperatura de 45 ° C a 65 ° C. La temperatura se mantiene constante.



EFFECTOS DE JoinMAX.

- Facilita la relajación de los músculos y ligamentos, relaja las articulaciones, alivia el reumatismo y la artritis
- Relaja los músculos y las articulaciones alrededor de la rodilla. Si usted lo utiliza antes de un ejercicio o un paseo (durante media hora), impide la aparición de inflamación y reduce el dolor.

El efecto de reducción del dolor de los músculos de la rodilla es reconocido por la KFDA (autoridad de control sanitario). Joinmax es un aparato con registro en la FDA (USA)



Botón para disminuir la temperatura
Cada vez que pulse disminuye la temperatura
de 5°C entre 45 y 55 °C
de 1°C entre 56 y 65°C

Botón para aumentar la temperatura
Cada vez que pulse aumenta la temperatura
de 5°C entre 45 y 55 °C
de 1°C entre 56 y 65°C

botón de encendido / apagado

Visualización de la temperatura

Luz indicadora
Indica el funcionamiento
de la lámpara térmica

Banda elástica
Permite el ajuste y
mantenimiento en la rodilla



Lámpara de infrarrojos
irradia entre
700 y 50 000 nanómetros

Cátodos térmicos
Irradia el calor
profundamente
en la piel

Pastillas de plata pura
Difunde la energía térmica
en las zonas de aplicación
y permiten una acción
antibacteriana.


Las lamparas de infrarrojos y los cátodos térmicos
con una longitud de onda que va desde
700 a 50 000 nanómetros.

Gracias a su diseño ergonómico
hechos de materiales suaves y robustos, JoinMAX se acopla
perfectamente a la rodilla, fácil de utilizar

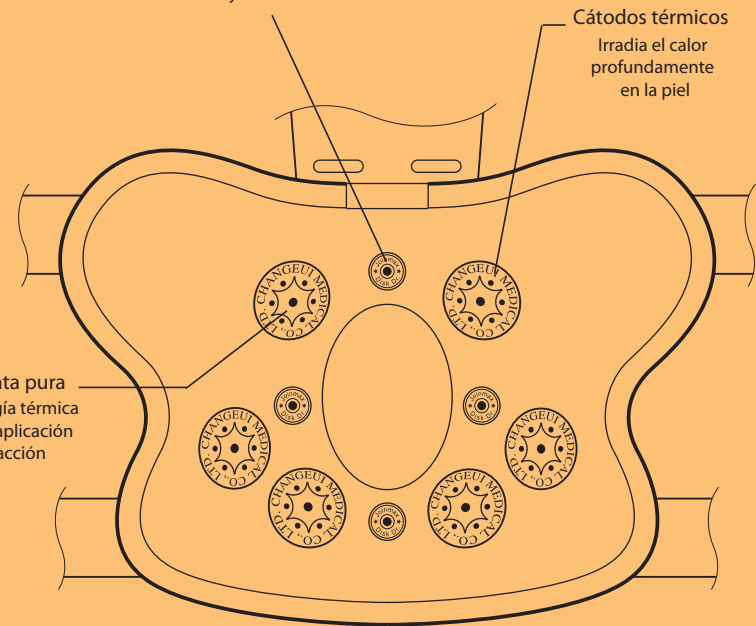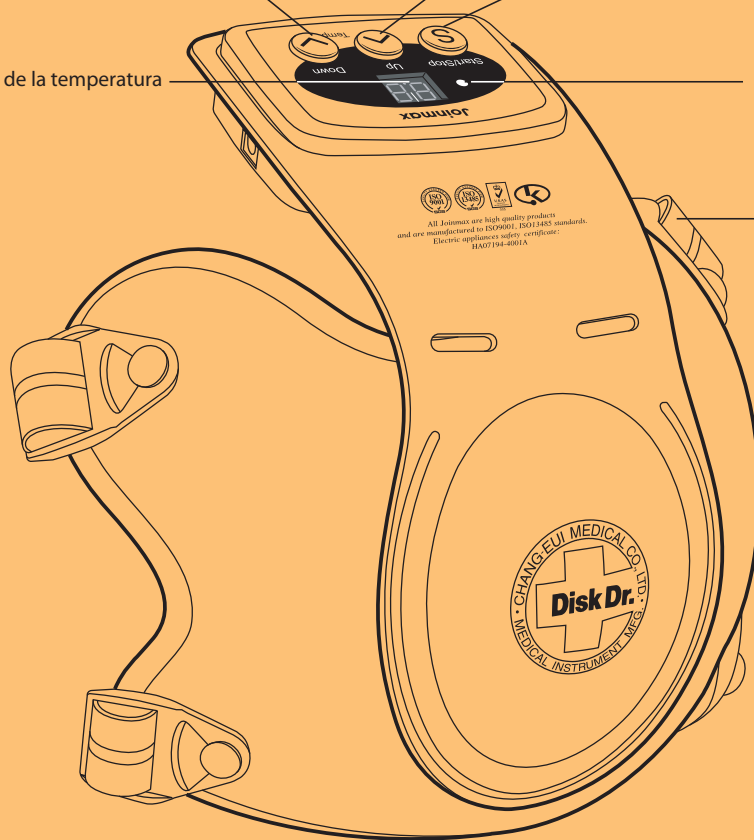



Utilice la protección prevista para aislar la piel de los cátodos

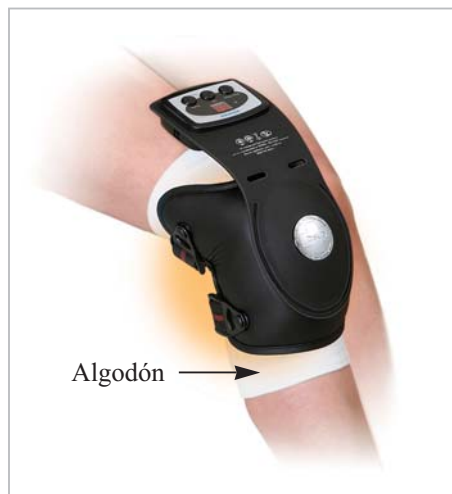

Si usted ha perdido la protección usted puede utilizar algodón



También puede utilizar directamente sobre mallas o pantalones

Recomendaciones de uso

- Utilice JoinMAX antes de hacer ejercicio físico (1 / 2 horas antes), sus músculos y articulaciones se relajarán para que usted pueda hacer su ejercicio libremente.
- Para un tratamiento óptimo, recomendamos la aplicación de JoinMAX dos o tres veces al día durante 30 minutos a temperatura moderada (la temperatura óptima es la más caliente que pueda soportar cómodamente).
- Un cambio en la temperatura demasiado rápido puede disminuir su efecto, la temperatura debe ajustarse lentamente.
- Por favor, utilice la protección prevista para evitar quemaduras

Usted debe utilizar JoinMAX si...

- Si sufre de artrosis o reumatismo.
- Si tiene dolor en la articulación de la rodilla.
- Si sufre cuando cambia el tiempo.
- Si tiene dolor cuando sube o baja escaleras.
- Si se le duelen las rodillas al final del día.
- Si realiza una actividad física o deportiva que castiga las rodillas.

Modo de empleo

- 1/ aplicar la protección en la rodilla, colocar JoinMAX en la rodilla como se indica en las imágenes. y apretar las cinchas.
 - 2/ después de conectar el adaptador de cable de alimentación, conectar el adaptador al panel de control (Una vez conectado muestra << - >>).
 - 3/ para iniciar pulsa START / STOP, cada clic cambia entre apagado y encendido.
 - 4/ pulse el botón UP para iniciar el tratamiento térmico. Se recomienda usar una temperatura moderada en el primer tratamiento.
 - 5/ Usted puede elegir cualquier temperatura entre 45 y 65 ° C utilizando el botón UP.
 - 6/ Puede regular la temperatura en intervalos de 5 ° C entre 45 y 55 ° C y 1 ° C entre 56 y 65 ° C.
- 6/ JoinMAX dispone de un temporizador y se detiene automáticamente después de media hora. para alargar el pulsar de nuevo START, la temperatura queda registrada y no la tiene que configurar de nuevo.



Transformador



Cable de alimentación



Protección



Nº de autorización médica : 04-1246
 Instrumento médico fabricado con licencia Nº 651
 Fabricado por : Changeui Médical Co, Ltd
 Teléfono de atención a distribuidores
 911107844 www.diskdr.es

